


HOKUMEI

総合カタログ


Vol.11

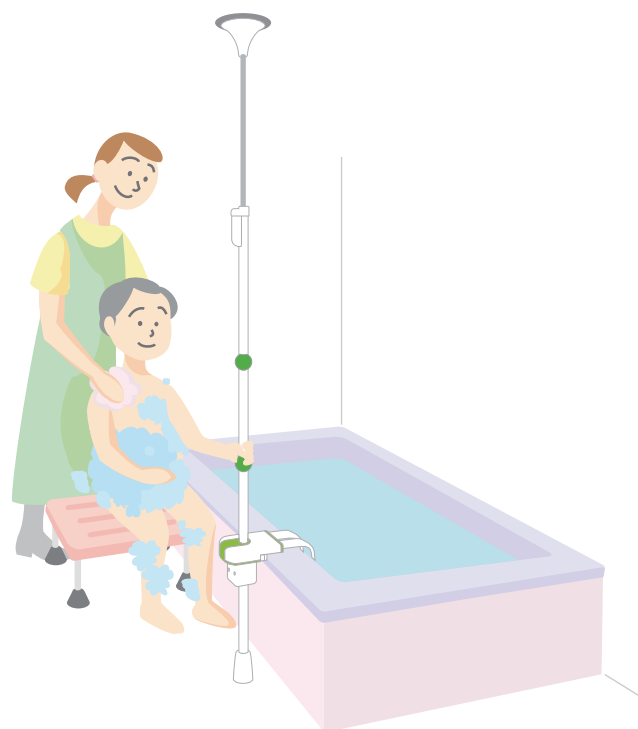

基本セット (丸型天井ベース)

立ち座り

転回・移乗

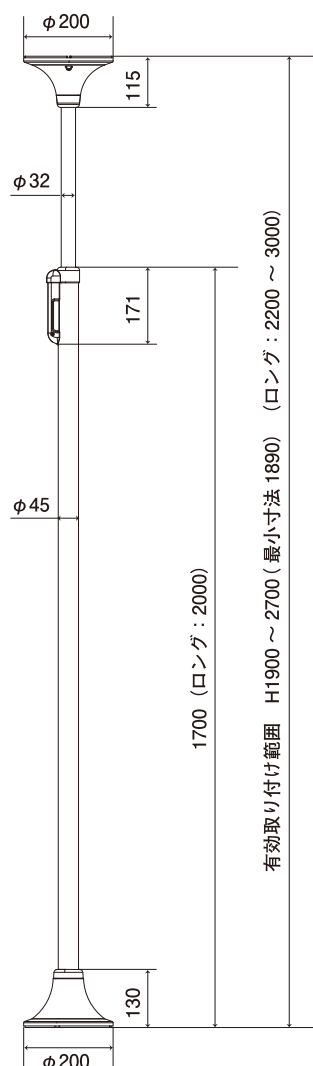

ベースポジ-eの基本となる 支柱型手すりセット

天井に当てて、ロックレバーを下げるだけの簡単施工です。基本セットをつかんだり、身体を預けるだけでも手すりとして有効です。またオプションの手すりを組み合わせることで、様々な利用者の状況に対応し、活動範囲を広げることが可能となります。



基本セット (丸型天井ベース)

メーカー希望
小売価格 **¥49,500** (税込)

本体価格 **¥45,000**

品 番	TAISコード
BPE-100-11	00254-000052

基本セットロングタイプ (丸型天井ベース)

メーカー希望
小売価格 **¥55,000** (税込)

本体価格 **¥50,000**

品 番	TAISコード
BPE-100-21	00254-000354



耐水仕様

ベースポジ-e基本セットの下部ベースを耐水ベースに交換することで、玄関ポーチ・ベランダ等の水や雨がかかる場所でも使用可能になります。



※浴室での使用はできません。

耐水ベース

メーカー希望
小売価格 **¥8,800** (税込)

本体価格 **¥8,000**

品 番
BPE-100-90



基本セット丸型天井ベース耐水

メーカー希望
小売価格 **¥55,000** (税込)

本体価格 **¥50,000**

品 番	TAISコード
BPE-100-81	00254-000053

※屋内用ベースは付属しません。

基本セットロングタイプ 丸型天井ベース耐水

メーカー希望
小売価格 **¥60,500** (税込)

本体価格 **¥55,000**

品 番	TAISコード
BPE-100-31	00254-000356


※屋内用ベースは付属しません。



基本セット（T型天井ベース）

立ち座り

転回・移乗

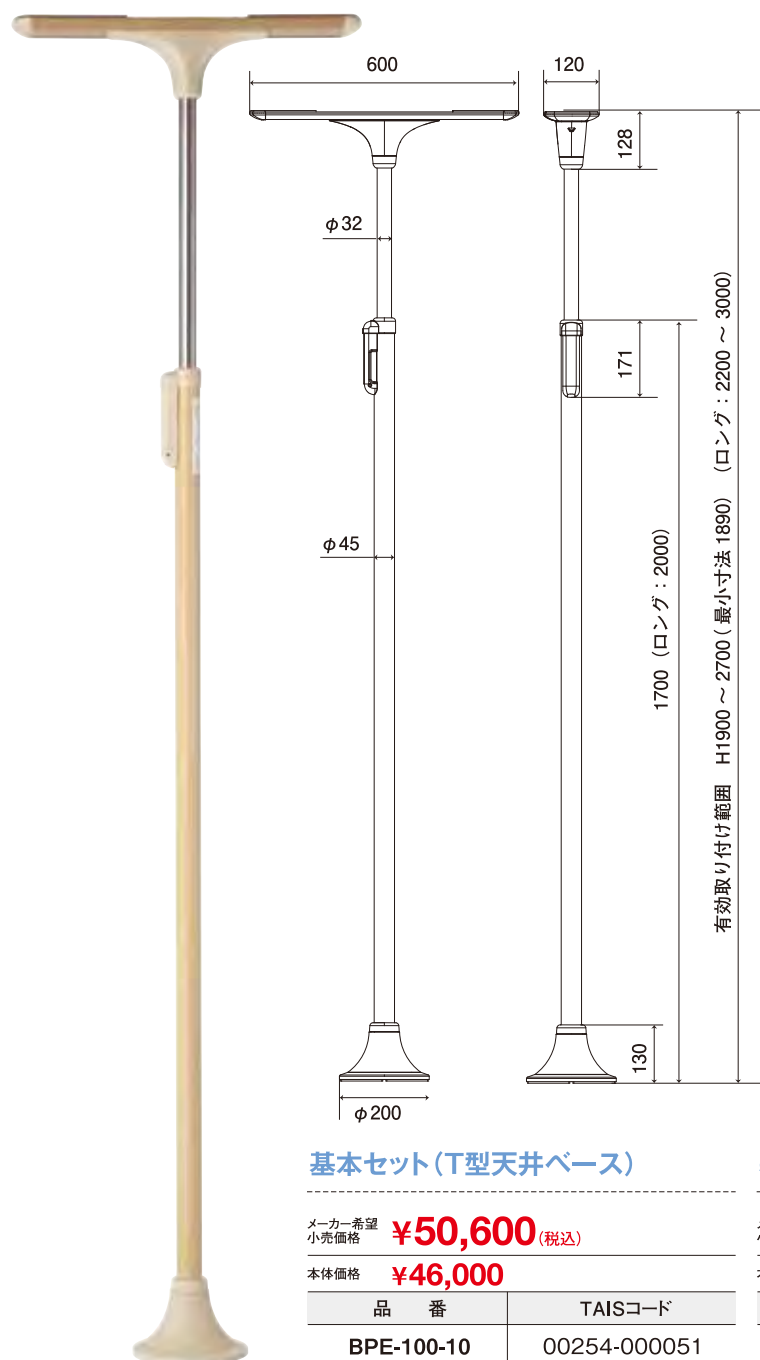

和室天井構造向けの 基本セット

T型天井ベースを、和天の竿にかけることで、
和室でもベースポジ-eの使用が可能となります。



基本セット(T型天井ベース)

メーカー希望
小売価格 **¥50,600** (税込)

本体価格 **¥46,000**

品 番	TAISコード
BPE-100-10	00254-000051

基本セットロングタイプ(T型天井ベース)

メーカー希望
小売価格 **¥56,100** (税込)

本体価格 **¥51,000**

品 番	TAISコード
BPE-100-20	00254-000353



耐水仕様

ベースポーチ基本セットの下部ベースを耐水ベースに交換することで、玄関ポーチ・ベランダ等の水や雨がかかる場所でも使用可能になります。



 ※浴室での使用はできません。

耐水ベース

メーカー希望
小売価格 **¥8,800**(税込)

本体価格 **¥8,000**

品番
BPE-100-90



基本セットT型天井ベース耐水

メーカー希望
小売価格 **¥56,100**(税込)

本体価格 **¥51,000**

品 番	TAISコード
BPE-100-80	00254-000066

※屋内用ベースは付属しません。

基本セットロングタイプ T型天井ベース耐水

メーカー希望
小売価格 **¥61,600**(税込)

本体価格 **¥56,000**

品 番	TAISコード
BPE-100-30	00254-000355

※屋内用ベースは付属しません。



b 型手すり

椅子からの立ち座り時に縦グリップ部だけではなく、大きめのカーブを手すりに設け、さらに握りやすいよう凹凸をつけることで、手が滑りにくいよう工夫しています。

立ち座り


転回・移乗

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット


使用手順

1

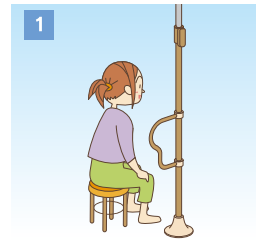


手すりを握りたい腕の側に設置します。

2

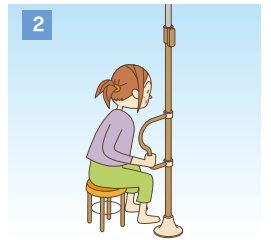

手すりの下部の直線部を握ります。

3

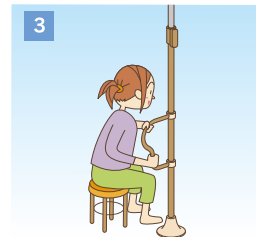

反対側の手で手すりの上部を握り重心を前方に移動させていきます。

4




身体を手すりに引きつけるように上半身を前傾させ、腰を浮かせていきます。

5



手すりの上部をつかんだまま膝を伸ばし立位をとります。

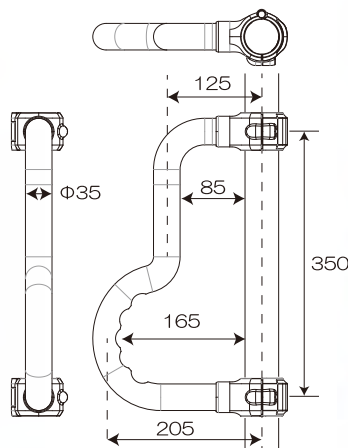

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥71,500** (税込)

本体価格 **¥65,000**

品 番	TAISコード
BPE-S200-10	00254-000375

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥72,600** (税込)

本体価格 **¥66,000**

品 番	TAISコード
BPE-S100-10	00254-000371

b型手すり単品

メーカー希望
小売価格 **¥22,000** (税込)

本体価格 **¥20,000**

品 番	TAISコード
BPE-300-90	00254-000367

b 型手すりロング

椅子からの立ち座り、床からの立ち座り時に縦グリップ部だけではなく、大きめのカーブを手すりに設け、さらに握りやすいよう凹凸もつけることで、手が滑りにくいよう工夫しています。

立ち座り


転回・移乗

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット


使用手順

1

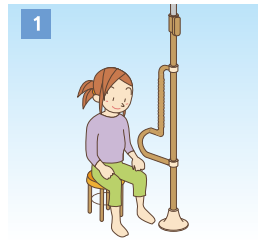


手すりを握りたい腕の側に設置します。

2

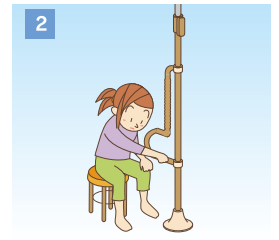


手すりの下部の直線部を握ります。

3

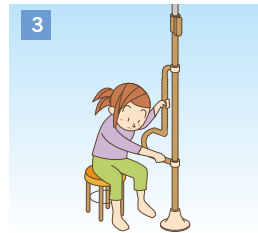


反対側の手を手すりの上部を握り重心を前方に移動させていきます。

4

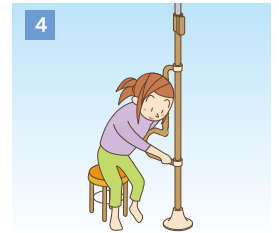


身体を手すりに引きつけるように上半身を前傾させ、腰を浮かせていきます。

5

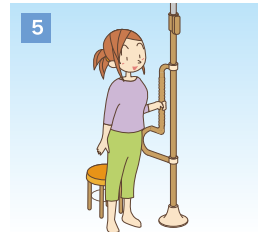

手すりの上部をつかんだまま膝を伸ばし立位をとります。

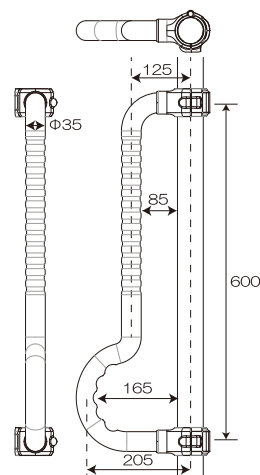

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥73,700** (税込)

本体価格 **¥67,000**

品 番	TAISコード
BPE-S200-20	00254-000376

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥74,800** (税込)

本体価格 **¥68,000**

品 番	TAISコード
BPE-S100-20	00254-000372

b型手すりロング単品

メーカー希望
小売価格 **¥24,200** (税込)

本体価格 **¥22,000**

品 番	TAISコード
BPE-300-100	00254-000368

D 型手すり

椅子からの立ち座りに、正面または利き腕側（健側）に設置して、プッシュアップ利用できます。

立ち座り


転回・移乗

丸型天井ベースセット


T型天井ベースセット




使用手順

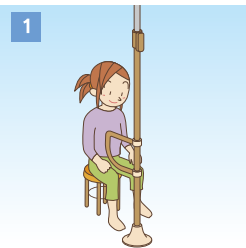

1 手すりを握りたい腕の側に設置します。

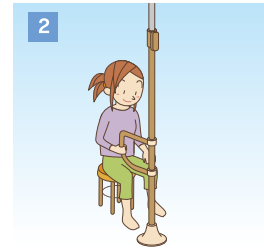


2 手すりの手前の直線部を握ります。

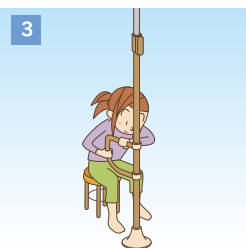


3 反対側の手で手すりの上部をつかみ前方へ重心移動させていきます。



4 身体を手すりに引きつけるように上半身を前傾させ、プッシュアップし腰を浮かせていきます。

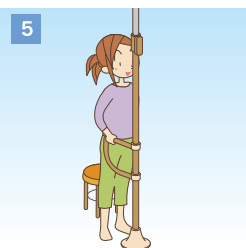

5 手すりをつかんだまま膝を伸ばし立位をとります。

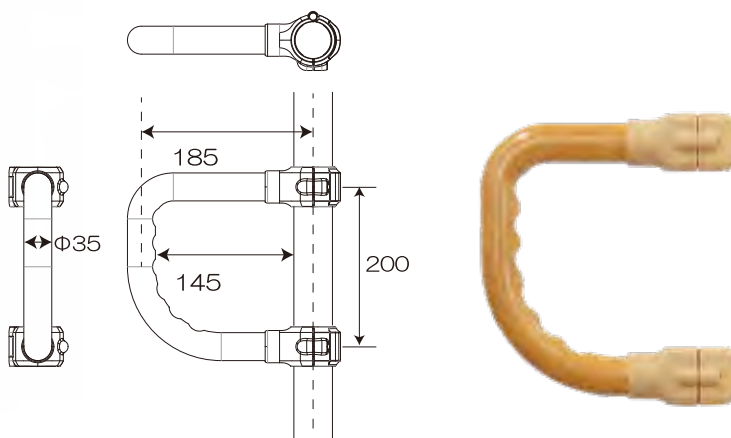

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥66,000** (税込)

本体価格 **¥60,000**

品 番	TAISコード
BPE-S200-30	00254-000377

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥67,100** (税込)

本体価格 **¥61,000**

品 番	TAISコード
BPE-S100-30	00254-000373

D型手すり単品

メーカー希望
小売価格 **¥16,500** (税込)

本体価格 **¥15,000**

品 番	TAISコード
BPE-300-110	00254-000369

I型手すりロング

椅子からの立ち座り、床からの立ち座り、段差の昇降など、体の上下動が大きい動作に有効な長い手すりです。グリップボールに指が引っかかることで手が滑りにくいよう工夫しています。

立ち座り


転回・移乗

丸型天井ベースセット


T型天井ベースセット



使用手順

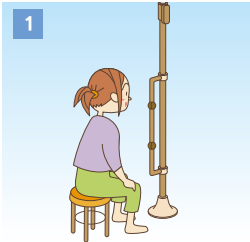


1 手すりを握りたい腕の側に設置します。

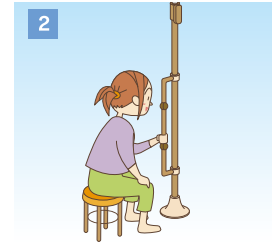

2 手すりの直線部を握り、重心を前方に移動させていきます。




3 反対側の手で手すりの上部をしっかりと握ります。

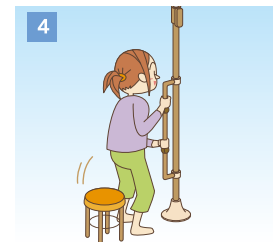

4 身体を引っ張り上げるようにして腰を浮かせていきます。



5 手すり上部をつかみ直して、膝を伸ばし立位をとります。

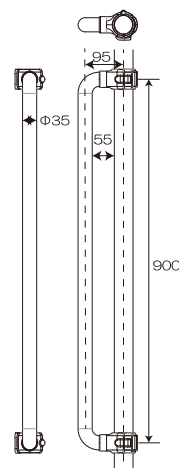

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥71,500** (税込)

本体価格 **¥65,000**

品 番	TAISコード
BPE-S200-40	00254-000378

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥72,600** (税込)

本体価格 **¥66,000**

品 番	TAISコード
BPE-S100-40	00254-000374

I型手すりロング単品

メーカー希望
小売価格 **¥22,000** (税込)

本体価格 **¥20,000**

品 番	TAISコード
BPE-300-120	00254-000370

円型手すり

立ち上がりから移乗動作において、移乗方向に制約がかからず、方向転換の際、手足の連動を生みやすくする手すりです。

立ち座り

転回・移乗

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット



丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥77,000** (税込)

本体価格 **¥70,000**

品番	TAISコード
BPE-S30-21	00254-000124

T型天井ベースセット


メーカー希望
小売価格 **¥78,100** (税込)

本体価格 **¥71,000**

品番	TAISコード
BPE-S30-20	00254-000123

使用手順

1

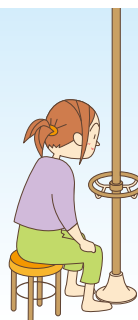

円型手すりの正面にふくらはぎの後ろにこぶし一つ分の余裕をもって座ります。

2




手すりをつかみ、引き込むように、上半身を前傾させて、腰を浮かしていきます。

3




円型手すりにかぶさるように掴み、膝を伸ばしていきます。

4

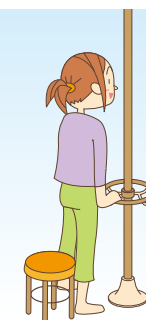

手すりをつかみ、引き込むように、膝を支点にして腰を浮かせていきます。

円型手すり単品

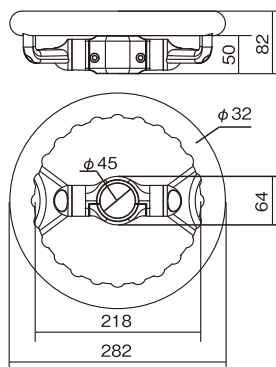

円型手すり単品

メーカー希望
小売価格 **¥27,500** (税込)

本体価格 **¥25,000**

品番	TAISコード
BPE-300-20	00254-000131

角型手すり

ポールからの出幅を抑えつつ、縦、横、両手で支持できる縦向き、上から押さえ込んで使える横向きに組換え可能な手すりです。

立ち座り

転回・移乗

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥77,000** (税込)

本体価格 **¥70,000**

品番	TAISコード
BPE-S30-31	00254-000126

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥78,100** (税込)

本体価格 **¥71,000**

品番	TAISコード
BPE-S30-30	00254-000125

使用手順

1



角型手すりの正面にふくらはぎの後ろにこぶし一つ分の余裕を持って座ります。

2



手すりをつかみ、前方へ引き込むように、上半身を前傾させていきます。

3




身体を手すりに引きつけるように上半身を前傾させ、腰を浮かせていきます。

4



手すりをつかんだまま上半身をブッシュアップし、膝を伸ばし立位をとります。


角型手すり単品

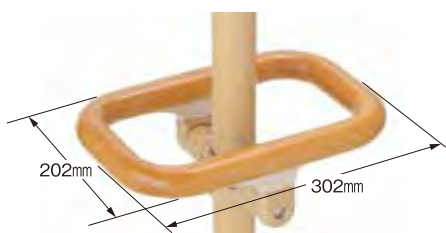

▲横位置



▲縦位置

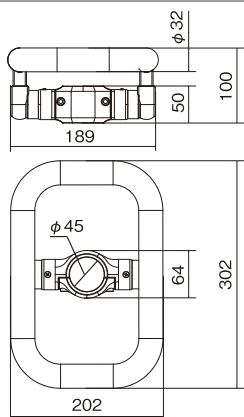

角型手すり単品

メーカー希望
小売価格 **¥27,500** (税込)

本体価格 **¥25,000**

品番	TAISコード
BPE-300-30	00254-000132

膝当て手すり

立ち座りの動作や立位保持の際に、膝を当てることで膝くずれを予防することができ、介助量の負担軽減につながります。また、腰部や胸部で支えることで、姿勢保持にも利用できます。

立ち座り

立位保持

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥71,500** (税込)

本体価格 **¥65,000**

品 番	TAISコード
BPE-S20-11	00254-000076

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥72,600** (税込)

本体価格 **¥66,000**

品 番	TAISコード
BPE-S20-10	00254-000075

使用手順

1



端座位で座り、膝を膝当てに当てます。

2




手すりもしくは支柱をつかみ、膝を支点にして上半身を前傾させて腰を浮かせていきます。

3



支柱に肩を当てるようにしながら上体を上げていきます。この時、膝は膝当てに付けたままです。

4

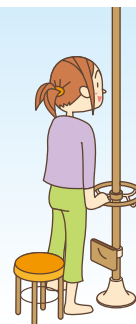

上体を伸ばし、立位を取ります。立位の際、膝の動揺がある場合、そのまま膝当てに膝を当て動揺を抑えながら立位を維持します。


膝当て手すり単品



▲横取り付け



▲縦取り付け

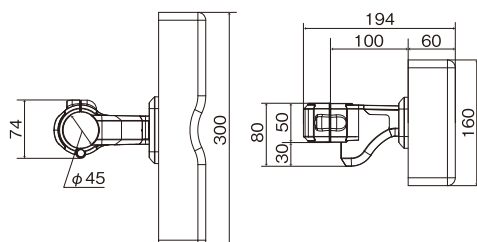

膝当て手すり単品

メーカー希望
小売価格 **¥22,000** (税込)

本体価格 **¥20,000**

品 番	TAISコード
BPE-200-10	00254-000127

肘置き手すり

前腕部で支持することで、立ち座りや姿勢保持をサポートする手すりです。リウマチなど握ることが困難な場合等にも有効です。前腕部の左右への動揺を抑える形状になっていることで、上体の安定をとるのに有効です。

立ち座り

立位保持

リウマチ

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥71,500** (税込)

本体価格 **¥65,000**

品 番	TAISコード
BPE-S20-21	00254-000078

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥72,600** (税込)

本体価格 **¥66,000**

品 番	TAISコード
BPE-S20-20	00254-000077

使用手順

1



肘置きを斜め前に使用者の矢状面と平行になるように座ります。

2



肘置きに手と腕をのせ、上半身を安定させます。

3




肘置き手すり前方を手で押さえながら、上半身を前傾していき、腰を浮かせます。

4



手のひらでプッシュアップしていき、上半身を起こしながら立位をとります。

肘置き手すり単品

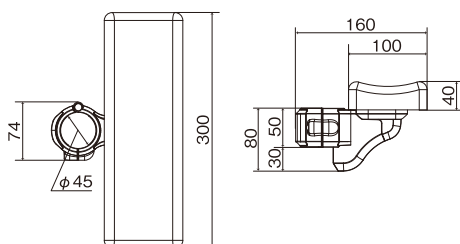

肘置き手すり単品

メーカー希望
小売価格 **¥22,000** (税込)

本体価格 **¥20,000**

品 番	TAISコード
BPE-200-20	00254-000128

プッシュ手すり

立ち座り

リウマチ

手のひらで押さえ込んで使用する手すりです。
上体の持ち上げ動作や手のひらでの姿勢保持に有効です。
床からの立ち上がり時は、膝くらいの高さに付けると効果的です。

丸型天井ベースセット

T型天井ベースセット

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥66,000** (税込)
本体価格 **¥60,000**

品番	TAISコード
BPE-S20-31	00254-000080

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥67,100** (税込)
本体価格 **¥61,000**

品番	TAISコード
BPE-S20-30	00254-000079

使用手順

1



プッシュ手すりを自分の利き手の横少し前にして座ります。

2



手のひらで手すりを押さえるようにして体重を乗せ、身体を安定させます。

3




手のひらでプッシュアップするように上半身を持ち上げていきます。

4



腕を伸ばして、上半身を起こすと同時に膝を伸ばし、立位をとっていきます。

■ プッシュ手すり単品

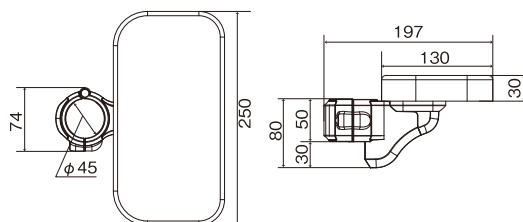

プッシュ手すり単品

メーカー希望
小売価格 **¥16,500** (税込)
本体価格 **¥15,000**

品番	TAISコード
BPE-200-30	00254-000129

ウェーブ型手すり

グリップ部をウェーブ状にすることで、握り込みやすく滑りにくい手すりです。
立ち座りや、段差の昇降などの動きをサポートします。
標準とロングの2種類長さがあります。

立ち座り

転回・移乗


ウェーブ型手すりロング
丸型天井ベースセット

T型天井ベースも
選べます

ウェーブ型手すり
T型天井ベースセット


丸型天井ベースも
選べます

標準
サイズ


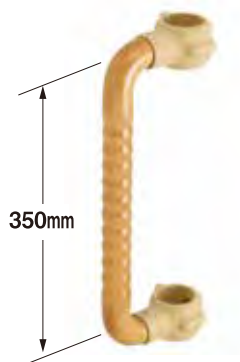


350mm

ロング
サイズ

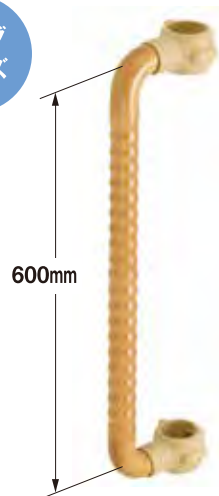

600mm

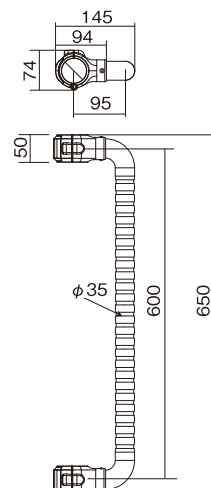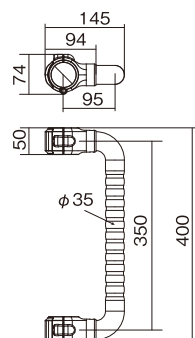

標準サイズセット品価格

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥63,800** (税込)

本体価格 **¥58,000**

品 番	TAISコード
BPE-S30-11	00254-000122

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥64,900** (税込)

本体価格 **¥59,000**

品 番	TAISコード
BPE-S30-10	00254-000121

ロングサイズセット品価格

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥64,900** (税込)

本体価格 **¥59,000**

品 番	TAISコード
BPE-S30-41	00254-000135

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥66,000** (税込)

本体価格 **¥60,000**

品 番	TAISコード
BPE-S30-40	00254-000134

ウェーブ型手すり単品価格

標準サイズ

メーカー希望
小売価格 **¥14,300** (税込)

本体価格 **¥13,000**

品 番	TAISコード
BPE-300-10	00254-000130

ロングサイズ

メーカー希望
小売価格 **¥15,400** (税込)

本体価格 **¥14,000**

品 番	TAISコード
BPE-300-40	00254-000133

グリップアーム-e

握り部に凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すりです。
トイレや玄関ポーチ・ベランダなどに有効です。
ショートタイプの3P・ロングタイプの5P・傾斜タイプの5P斜の3種があります。

立ち座り

転回・移乗

3Pセット
丸型天井ベース

3Pセット
T型天井ベース






3P



5P



5P斜

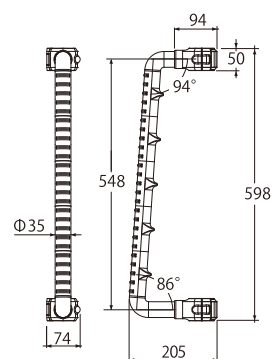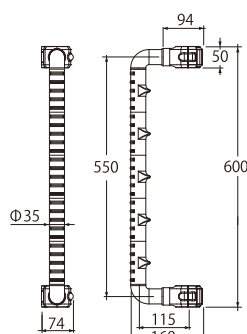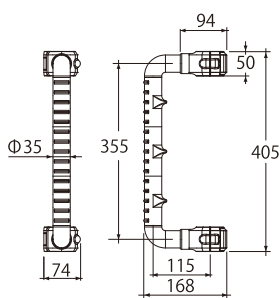

丸型天井ベースセット価格

3P 丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥69,300** (税込)

本体価格 **¥63,000**

品番	TAISコード
BPE-S30-71	00254-000141

T型天井ベースセット価格

3P T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥70,400** (税込)

本体価格 **¥64,000**

品番	TAISコード
BPE-S30-70	00254-000140

5P 丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥71,500** (税込)

本体価格 **¥65,000**

品番	TAISコード
BPE-S30-61	00254-000139

5P T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥72,600** (税込)

本体価格 **¥66,000**

品番	TAISコード
BPE-S30-60	00254-000138

5P斜 丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥71,500** (税込)

本体価格 **¥65,000**

品番	TAISコード
BPE-S30-51	00254-000137

5P斜 T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥72,600** (税込)

本体価格 **¥66,000**

品番	TAISコード
BPE-S30-50	00254-000136

グリップアーム-e単品価格

グリップアーム-e 3P単品

メーカー希望
小売価格 **¥19,800** (税込)

本体価格 **¥18,000**

品番	TAISコード
BPE-300-70	00254-000144

グリップアーム-e 5P単品

メーカー希望
小売価格 **¥22,000** (税込)

本体価格 **¥20,000**

品番	TAISコード
BPE-300-60	00254-000143

グリップアーム-e 5P斜単品

メーカー希望
小売価格 **¥22,000** (税込)

本体価格 **¥20,000**

品番	TAISコード
BPE-300-50	00254-000142

グリップアーム-e ベスボジ-e 耐水

立ち座り

転回・移乗

握り部に凹凸の滑り止めがついた、水にぬれても滑りにくい樹脂製の手すりです。トイレや玄関ポーチ・ベランダなどに有効です。

ショートタイプの3P・ロングタイプの5P・傾斜タイプの5P斜の3種があります。

 ※浴室での使用はできません。

基本セット 耐水
丸型天井ベース



基本セット 耐水
T型天井ベース



3P


 耐水セット



355mm

5P


 耐水セット

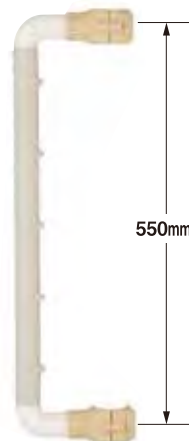




550mm

5P斜

 耐水セット

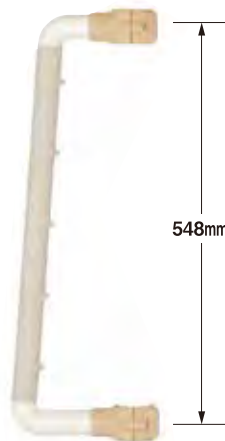

548mm

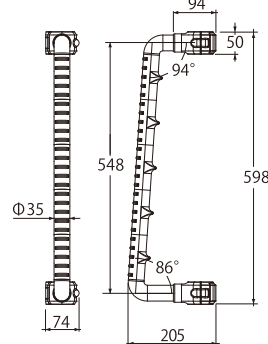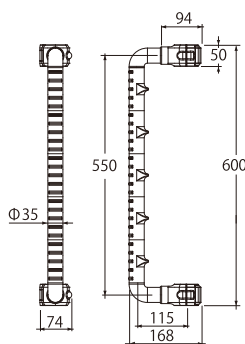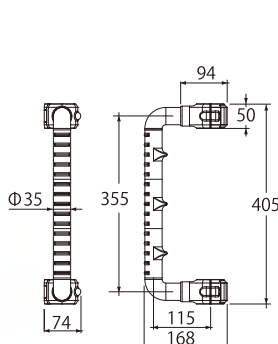

3Pセット品価格

丸型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥74,800** (税込)

本体価格 **¥68,000**

品 番	TAISコード
BPE-S80-71	00254-000150

T型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥75,900** (税込)

本体価格 **¥69,000**

品 番	TAISコード
BPE-S80-70	00254-000149

耐水ベース

メーカー希望
小売価格 **¥8,800** (税込)

本体価格 **¥8,000**

品 番
BPE-100-90



5Pセット品価格

丸型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥77,000** (税込)

本体価格 **¥70,000**

品 番	TAISコード
BPE-S80-61	00254-000148

T型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥78,100** (税込)

本体価格 **¥71,000**

品 番	TAISコード
BPE-S80-60	00254-000147

5P斜セット品価格

丸型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥77,000** (税込)

本体価格 **¥70,000**

品 番	TAISコード
BPE-S80-51	00254-000146

T型天井ベースセット耐水

メーカー希望
小売価格 **¥78,100** (税込)

本体価格 **¥71,000**

品 番	TAISコード
BPE-S80-50	00254-000145

リングアーム

樹脂製グリップの小型C型リングアームです。水に濡れても滑りにくい
素材・形状です。コンパクトでトイレなど狭小な場所に有効です。

立ち座り

転回・移乗

丸型天井ベースセット


T型天井ベースセット



リングカラー
(グリーン)



リングカラー
(ベージュ)

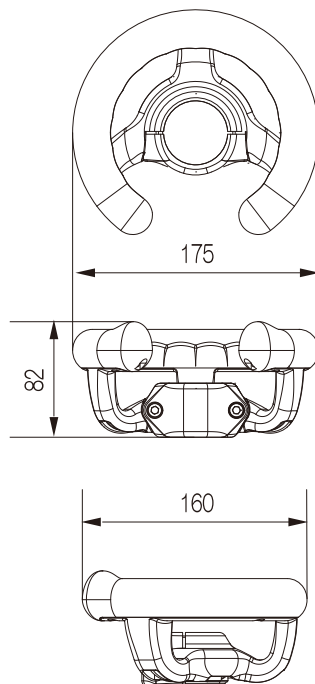

丸型天井ベースセット(グリーン)

メーカー希望
小売価格 **¥62,700** (税込)

本体価格 **¥57,000**

品 番	TAISコード
BPE-RA200G	00254-000399

T型天井ベースセット(グリーン)

メーカー希望
小売価格 **¥63,800** (税込)

本体価格 **¥58,000**

品 番	TAISコード
BPE-RA100G	00254-000397



リングアーム(グリーン)

メーカー希望
小売価格 **¥14,300** (税込)

本体価格 **¥13,000**

品 番	TAISコード
BPERR-100	00254-000395



リングアーム(ベージュ)

メーカー希望
小売価格 **¥14,300** (税込)

本体価格 **¥13,000**

品 番	TAISコード
BPERR-110	00254-000396

丸型天井ベースセット(ベージュ)

メーカー希望
小売価格 **¥62,700** (税込)

本体価格 **¥57,000**

品 番	TAISコード
BPE-RA200B	00254-000400

T型天井ベースセット(ベージュ)

メーカー希望
小売価格 **¥63,800** (税込)

本体価格 **¥58,000**

品 番	TAISコード
BPE-RA100B	00254-000398



耐水仕様

ベースポジ-e基本セットの下部ベースを耐水ベースに交換することで、玄関ポーチ・ベランダ等の水や雨がかかる場所でも使用
可能になります。



※浴室での使用はできません。



耐水ベース

メーカー希望
小売価格 **¥8,800** (税込)

本体価格 **¥8,000**

品 番
BPE-100-90

丸型天井ベース耐水(グリーン)

メーカー希望
小売価格 **¥68,200** (税込)

本体価格 **¥62,000**

品 番	TAISコード
BPE-RA210G	00254-000403

※屋内用ベースは付属しません。

T型天井ベース耐水(グリーン)

メーカー希望
小売価格 **¥69,300** (税込)

本体価格 **¥63,000**

品 番	TAISコード
BPE-RA110G	00254-000401

※屋内用ベースは付属しません。

丸型天井ベース耐水(ベージュ)

メーカー希望
小売価格 **¥68,200** (税込)

本体価格 **¥62,000**

品 番	TAISコード
BPE-RA210B	00254-000404

※屋内用ベースは付属しません。

T型天井ベース耐水(ベージュ)

メーカー希望
小売価格 **¥69,300** (税込)

本体価格 **¥63,000**

品 番	TAISコード
BPE-RA110B	00254-000402

※屋内用ベースは付属しません。

玄関アーム


段 差

玄関等段差のあるところにスペースを有効に使える、出幅のコンパクトな手すりです。
特殊なシリコン滑止めを使用していることで、横ズレに強い耐性があります。
高位差のある段差では、横向きに降りることで膝にかかる負担をより軽減することが可能です。

玄関アーム レギュラー



T型天井ベースも
選べます

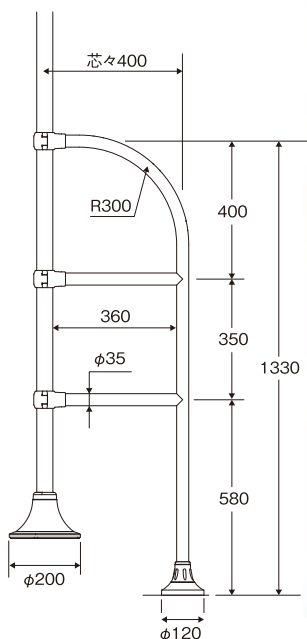

シリコン
滑り止めシート



玄関アーム レギュラーセット価格

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥96,800** (税込)

本体価格 **¥88,000**

品 番	TAISコード
BPE-S40-11	00254-000152

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥97,900** (税込)

本体価格 **¥89,000**

品 番	TAISコード
BPE-S40-10	00254-000151

耐水仕様 丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥102,300** (税込)

本体価格 **¥93,000**

品 番	TAISコード
BPE-S80-81	00254-000156

耐水仕様 T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥103,400** (税込)

本体価格 **¥94,000**

品 番	TAISコード
BPE-S80-80	00254-000155

玄関アーム レギュラー単品価格

メーカー希望
小売価格 **¥47,300** (税込)

本体価格 **¥43,000**

品 番	TAISコード
BPE-500-10	00254-000360

玄関アーム



丸グリップ




シリコン
滑り止めシート

玄関アーム ショート



T型天井ベースも
選べます

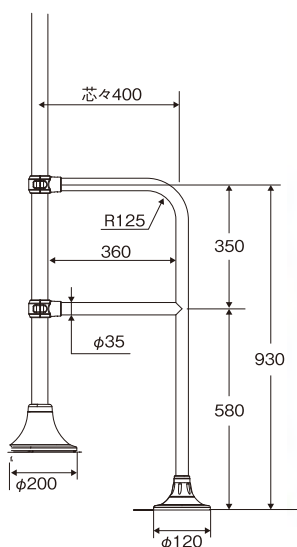

手すりカバー



シリコン
滑り止めシート



玄関アーム ショートセット価格

丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥91,300** (税込)

本体価格 **¥83,000**

品 番	TAISコード
BPE-S40-21	00254-000154

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥92,400** (税込)

本体価格 **¥84,000**

品 番	TAISコード
BPE-S40-20	00254-000153

耐水仕様 丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥96,800** (税込)

本体価格 **¥88,000**

品 番	TAISコード
BPE-S80-91	00254-000158

耐水仕様 T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥97,900** (税込)

本体価格 **¥89,000**

品 番	TAISコード
BPE-S80-90	00254-000157

玄関アーム ショート単品価格

メーカー希望
小売価格 **¥41,800** (税込)

本体価格 **¥38,000**

品 番	TAISコード
BPE-500-20	00254-000361

玄関アーム



手すりカバー



シリコン
滑り止めシート


H 型伸縮手すり 固定セット

立ち座り

歩 行

ベスポジ-e 基本セットをストレートに連結した手すりです。
壁にとらわれない手すりにすることで、目的に最適な動線をつくることができます。
伸縮手すりで間隔の調整も容易です。

丸型天井ベースセット

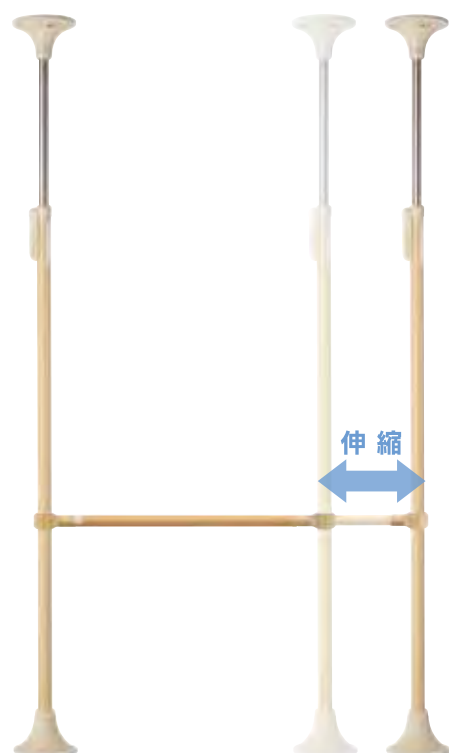

丸型天井ベースセット(固定)

メーカー希望
小売価格 **¥128,700** (税込)

本体価格 **¥117,000**

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H51-609	00254-000175
900～1200mm	BPE-H51-912	00254-000176

T 型天井ベースセット



T型天井ベースセット(固定)

メーカー希望
小売価格 **¥130,900** (税込)

本体価格 **¥119,000**

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H50-609	00254-000173
900～1200mm	BPE-H50-912	00254-000174


■ 縦仕様・横仕様の組み替え方

簡単調整・無段階調整・ロック機能

2種類の長さをご用意しました

■ 600～900mm
(実寸:515～815mm)

■ 900～1200mm
(実寸:815～1115mm)

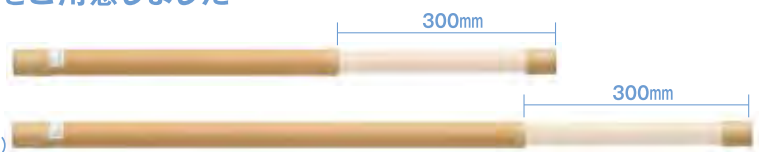


◆30cmの伸縮幅で容易に調整が可能です。

◆伸縮は無段階で必要な長さだけ調整が可能です。(注意:伸縮幅30cm以内)



◆伸縮の固定は、六角レンチ1本で可能です。緩める際は左回りで緩め、ロックは右回りでクリック音が鳴るまで回せば固定ができます。

手すりの勾配を緩くする為位置を少しずらしたい時や、框に踏み台を増やして手すりの位置を移動させたい時。

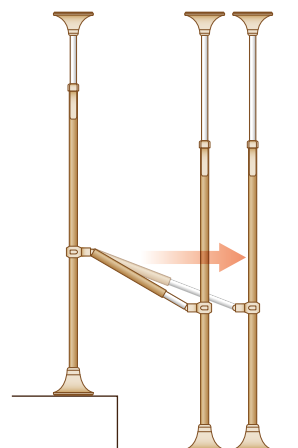

H 型伸縮手すり 曲げセット

立ち座り

歩 行

段 差

玄関など、段差があるところに対して手すりに角度をつけて連結できます。横曲げに組換えることで、オフセット型や出端・入端などのコーナー部にも対応できます。伸縮手すりと組み合わせることで、段差の間隔や、角度の変更による長さ変更も容易です。

丸型天井ベースセット



伸縮

T 型天井ベースセット



伸縮

丸型天井ベースセット(曲げ)

メーカー希望
小売価格 **¥130,240** (税込)

本体価格 **¥118,400**

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H61-609	00254-000179
900～1200mm	BPE-H61-912	00254-000180

T型天井ベースセット(曲げ)

メーカー希望
小売価格 **¥132,440** (税込)

本体価格 **¥120,400**

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H60-609	00254-000177
900～1200mm	BPE-H60-912	00254-000178



耐水仕様

T型天井ベースのタイプでも下部ベースを耐水ベースに交換することで、水の掛かる心配のある場所への取り付けも可能になります。



※浴室での使用はできません。

丸型天井ベースセット(固定)

メーカー希望
小売価格 **¥139,700** (税込)

本体価格 **¥127,000**

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H81-609	00254-000183
900～1200mm	BPE-H81-912	00254-000184

丸型天井ベースセット(曲げ)

メーカー希望
小売価格 **¥141,240** (税込)

本体価格 **¥128,400**

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H91-609	00254-000187
900～1200mm	BPE-H91-912	00254-000188

T型天井ベースセット(固定)

メーカー希望
小売価格 **¥141,900** (税込)

本体価格 **¥129,000**

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H80-609	00254-000181
900～1200mm	BPE-H80-912	00254-000182

T型天井ベースセット(曲げ)

メーカー希望
小売価格 **¥143,440** (税込)

本体価格 **¥130,400**

	品 番	TAISコード
600～900mm	BPE-H90-609	00254-000185
900～1200mm	BPE-H90-912	00254-000186



耐水ベース

メーカー希望
小売価格 **¥8,800** (税込)

本体価格 **¥8,000**

品 番
BPE-100-90

H 型木手すり 固定セット

立ち座り

歩 行

ベスポジ-e 基本セットをストレートに連結した手すりです。

壁や家具にとらわれず、自由に設置することができます。

H 型セットは連結の基本になるセットで、これを延長したり他のブラケットを使用したりして個別の様々な状況に対応できるようになります。

丸型天井ベースセット



丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥115,500** (税込)

本体価格 **¥105,000**

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H11-060	00254-000097
900mm	BPE-H11-090	00254-000054
1200mm	BPE-H11-120	00254-000105



T 型天井ベースセット



T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥117,700** (税込)

本体価格 **¥107,000**

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H10-060	00254-000081
900mm	BPE-H10-090	00254-000067
1200mm	BPE-H10-120	00254-000089

H 型木手すり 曲げセット

立ち座り

段 差

玄関など、段差があるところに対して手すりに角度をつけて連結できます。
横曲げに組替えることで、オフセット型や出端や入端にも対応できます。

丸型天井ベースセット



丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥117,040** (税込)

本体価格 **¥106,400**

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H21-060	00254-000098
900mm	BPE-H21-090	00254-000055
1200mm	BPE-H21-120	00254-000106

POINT 用途に合わせて曲げの方向を変更できます

縦傾斜




●階段等の段差のある場所

横傾斜



●廊下の曲がり角 ●部屋内の角 など

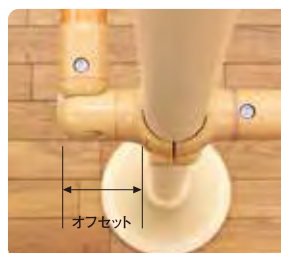

横曲げを利用したオフセット取り付け

※曲げブラケットを直ブラケットの代わりにして
水平に取り付けることはしないでください。

T 型天井ベースセット



T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥119,240** (税込)

本体価格 **¥108,400**

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H20-060	00254-000082
900mm	BPE-H20-090	00254-000068
1200mm	BPE-H20-120	00254-000090

H型木手すり 跳ね上げセット

立ち座り

歩 行

扉・押し入れ

ベースポジ-e 基本セットをつなぐ手すりです。手すりが跳ね上がることで、扉の前など、通行の制限を緩和できます。手すりは、跳ね上げ時には軽く、下すときには抵抗がかかる安全仕様です。

丸型天井ベースセット



POINT トルク機能



ヒンジ部は上げる時は軽く、下げる時は抵抗が増し、重く動作する為、上げた後に手すりが落ちてくる心配がありません。

付属 手すりホルダー



手すりを跳ね上げておく際に、手すりを固定する為のホルダー。



T型天井ベースセット



丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥132,000** (税込)

本体価格 **¥120,000**

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H31-060	00254-000099
900mm	BPE-H31-090	00254-000056
1200mm	BPE-H31-120	00254-000107

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥134,200** (税込)

本体価格 **¥122,000**

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H30-060	00254-000083
900mm	BPE-H30-090	00254-000069
1200mm	BPE-H30-120	00254-000091

H 型木手すり 取り外しセット

手すりを取り外すことができる連結手すりです。
押入れや屋内外をつなぐ時などに有効です。

立ち座り

歩 行

扉・押し入れ

丸型天井ベースセット



POINT

取り外し機能



取り外しができるブラケットがついており、不要なときは手すりを取り外せます。

付属 手すりホルダー

取り外した手すりを基本ポールに固定する為のホルダー。



T 型天井ベースセット



丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥118,800** (税込)

本体価格 **¥108,000**

	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H41-060	00254-000100
900mm	BPE-H41-090	00254-000057
1200mm	BPE-H41-120	00254-000108

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥121,000** (税込)

本体価格 **¥110,000**


	品 番	TAISコード
600mm	BPE-H40-060	00254-000084
900mm	BPE-H40-090	00254-000070
1200mm	BPE-H40-120	00254-000092

レール手すり

歩 行

レール手すりに腰や体幹を当てることで、歩行におけるふらつきを抑えることや、立位等の姿勢保持が可能です。また、横仕様に組み替えることで、手のひらや前腕部で支持しやすい手すりにすることが出来ます。

丸型天井ベースセット（縦仕様）

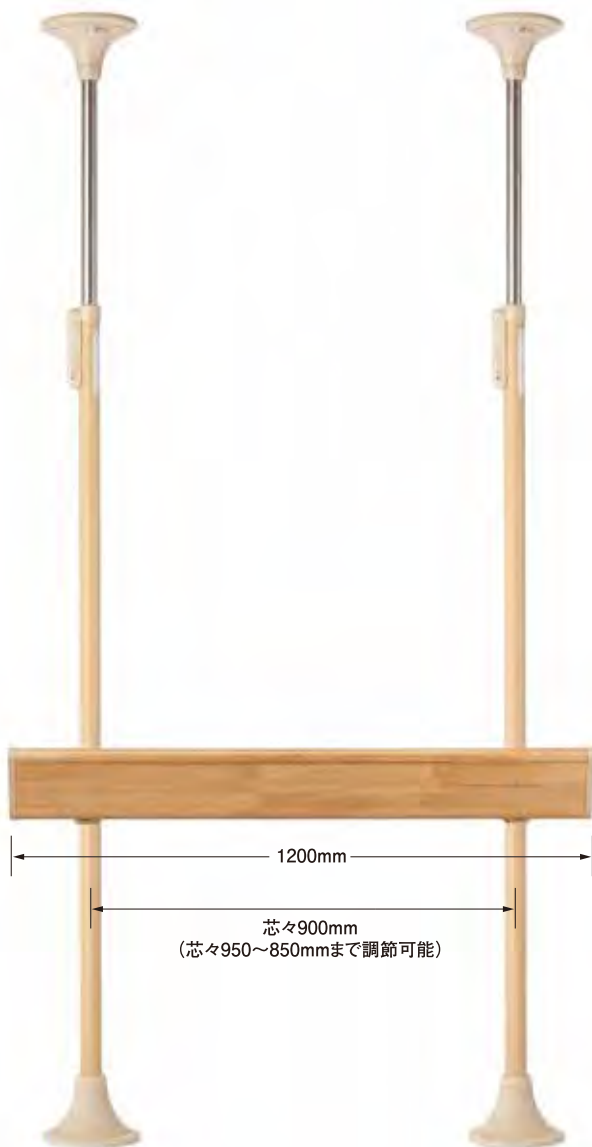

T型天井ベースセット（横仕様）



丸型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥139,700** (税込)

本体価格 **¥127,000**

	品 番	TAISコード
1200mm	BPE-H71-120	00254-000344

T型天井ベースセット

メーカー希望
小売価格 **¥141,900** (税込)

本体価格 **¥129,000**

	品 番	TAISコード
1200mm	BPE-H70-120	00254-000343

レール手すり単品



レール手すり

メーカー希望
小売価格 **¥40,700** (税込)

本体価格 **¥37,000**

品 番	TAISコード
BPE-300-80	00254-000342

H型連結キャップセット

H型連結キャップセット

メーカー希望
小売価格 **¥3,080** (税込)


本体価格 **¥2,800**

品 番	SBR-700-90
-----	------------




縦仕様・横仕様の組み替え方


組み換えはかんたん 手すりの差し替えて、縦横を簡単に組み替えられます。

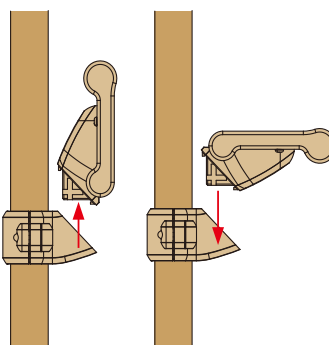

縦付け寸法

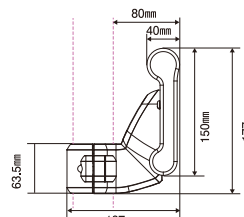

横付け寸法

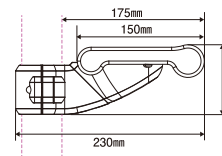


オプションの適用例


オプション手すりの選択の 参考にしてください

膝当て手すり

- ① 膝の動揺があり、下半身が不安定な人
- ② 筋力の低下があり、身体の姿勢保持力が弱い人
- ③ 体力がなく、同じ姿勢の保持が難しい人
- ④ 疾患や筋力低下によって身体のバランスが低下している人
- ⑤ 補助が必要だが、自力もしくは可能な限り自力で（簡易な補助のみで）立ち座り動作を行いたい人、移乗動作を目的とする人

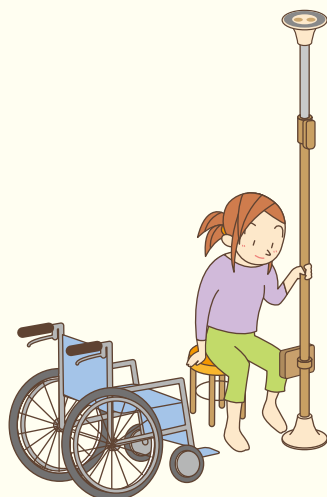

他のアーム類、手すり類と組合せることで
より効果が発揮されます

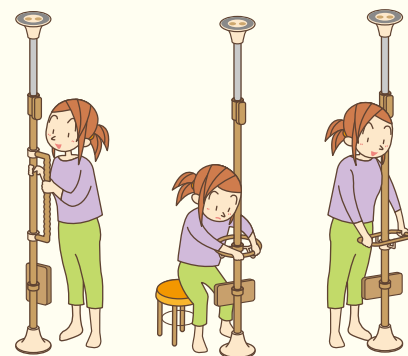


●ウェーブ型アーム
●グリップアーム-e

●円型手すり

●角型手すり


肘置き手すり・プッシュ手すり

- ① 立位から座位・座位から立位といった不安定な動作時の身体の支持が必要な人
- ② 立位動作の前方へ・着座の後方への重心移動の誘導が必要な人
- ③ リウマチなどで、握りが弱く、平手を用いて支持したい人
- ④ 前傾姿勢の保持・誘導が必要な人（トイレ動作・端座位への移動など）
- ⑤ プッシュアップ動作の必要な人
- ⑥ 手のひらもしくは前腕で身体を支持し座位耐久性を向上させたい人

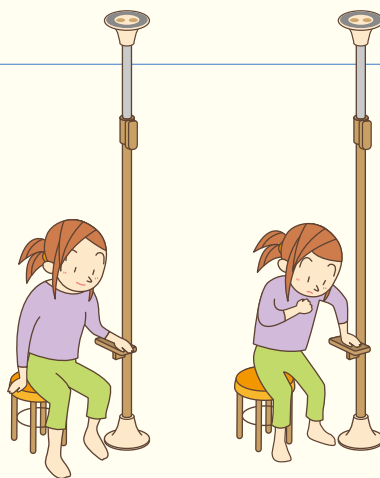

円型手すり・角型手すり

- ① 前傾姿勢への引き込みが必要な人
- ② 骨盤後傾による前傾姿勢が不十分な人
- ③ 立位動作の際、両手によるプッシュアップ動作が必要な人
- ④ 方向転換の際の支持が必要な人
- ⑤ 立位保持を自力で行い補助が必要な人
- ⑥ 前方支持や斜め前方向転換支持の必要な人
- ⑦ 補助は必要だが、立位保持を自力で出来る事が目的の方

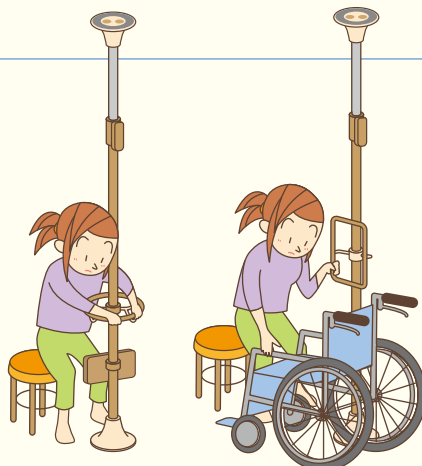

手すりセット

基本セットに取り付けて使用する手すりのセットです。

伸縮手すり

立ち座り

歩 行

■600~900mm(実寸:515~815mm)



■900~1200mm(実寸:815~1115mm)



メーカー希望
小売価格 **¥22,000**(税込)

本体価格 **¥20,000**

	品 番
600~900mm	SBR-600-609
900~1200mm	SBR-600-912

システム伸縮手すり固定セット

立ち座り

歩 行

■600~900mm(芯々:600~900mm)



■900~1200mm(芯々:900~1200mm)



メーカー希望
小売価格 **¥29,700**(税込)

本体価格 **¥27,000**

	品 番	TAISコード
600~900mm	SBR-30-609	00254-000169
900~1200mm	SBR-30-912	00254-000170

システム伸縮手すり曲げセット

立ち座り


歩 行

段 差

■600~900mm
(芯々:700~1000mm)



■900~1200mm
(芯々:1000~1300mm)

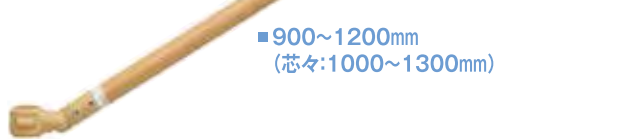

メーカー希望
小売価格 **¥31,240**(税込)

本体価格 **¥28,400**

	品 番	TAISコード
600~900mm	SBR-40-609	00254-000171
900~1200mm	SBR-40-912	00254-000172

システム木手すり 標準タイプ

立ち座り

歩 行

■600mm(木部:460mm / 実寸:514mm)



■900mm(木部:760mm / 実寸:814mm)



■1200mm(木部:1060mm / 実寸:1114mm)



メーカー希望
小売価格 **¥8,800**(税込)

本体価格 **¥8,000**

	品 番
600mm	SBR-200-060
900mm	SBR-200-090
1200mm	SBR-200-120

システム木手すり 固定セット

立ち座り

歩 行

■600mm (芯々:600mm)



■900mm (芯々:900mm)



■1200mm (芯々:1200mm)



メーカー希望
小売価格 **¥16,500** (税込)

本体価格 **¥15,000**

	品 番	TAISコード
600mm	SBR-10-060	00254-000113
900mm	SBR-10-090	00254-000062
1200mm	SBR-10-120	00254-000117

システム木手すり 曲げセット

立ち座り

歩 行

段 差

■1200mm
(芯々:1300mm)

■900mm
(芯々:1000mm)

■600mm
(芯々:700mm)



メーカー希望
小売価格 **¥18,040** (税込)

本体価格 **¥16,400**

	品 番	TAISコード
600mm	SBR-20-060	00254-000114
900mm	SBR-20-090	00254-000063
1200mm	SBR-20-120	00254-000118

システム木手すり 跳ね上げセット

立ち座り

歩 行

扉・押し入れ

■1200mm
(芯々:1300mm)

■900mm
(芯々:1000mm)

■600mm
(芯々:700mm)




メーカー希望
小売価格 **¥33,000** (税込)

本体価格 **¥30,000**

	品 番	TAISコード
600mm	SBR-70-060	00254-000115
900mm	SBR-70-090	00254-000064
1200mm	SBR-70-120	00254-000119

付属 手すりホルダー

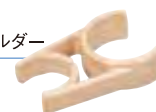

システム木手すり 取り外しセット

立ち座り

歩 行

扉・押し入れ

■600mm (芯々:700mm)



■900mm (芯々:1000mm)



■1200mm (芯々:1300mm)



メーカー希望
小売価格 **¥19,800** (税込)

本体価格 **¥18,000**

	品 番	TAISコード
600mm	SBR-80-060	00254-000116
900mm	SBR-80-090	00254-000065
1200mm	SBR-80-120	00254-000120

付属 手すりホルダー



ブラケット類

ベースポジ-eは基本セットとブラケット・オプションの組み合わせで様々な状況に合ったご利用者様に必要な手すりが提供できます。



システムエンドブラケット(直)

メーカー希望
小売価格 **¥3,850** (税込)

本体価格 **¥3,500**

品 番

SBR-100-10

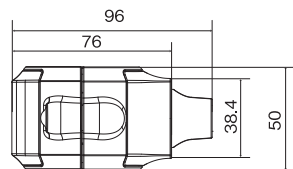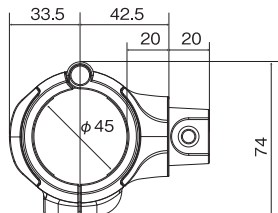



システムエンドブラケット(曲げ)

メーカー希望
小売価格 **¥4,620** (税込)

本体価格 **¥4,200**

品 番

SBR-100-20

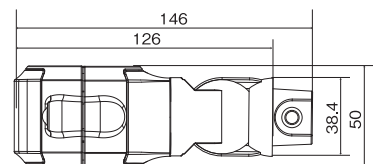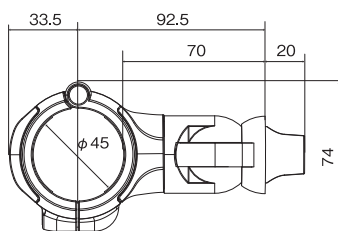



システム接続ブラケット(直×直)

メーカー希望
小売価格 **¥4,950** (税込)

本体価格 **¥4,500**

品 番

SBR-100-30

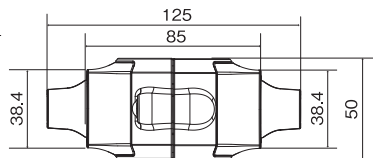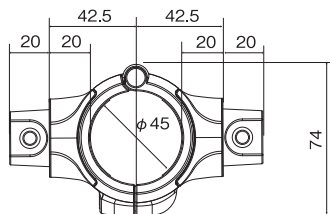



システム接続ブラケット(直×曲げ)

メーカー希望
小売価格 **¥5,720** (税込)

本体価格 **¥5,200**

品 番

SBR-100-40

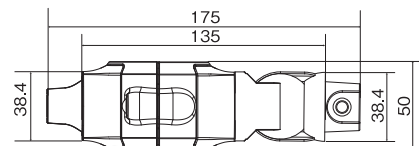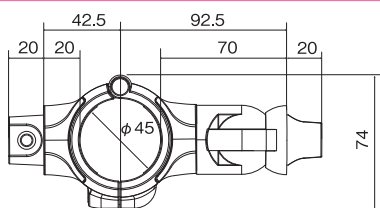



システム接続ブラケット(曲げ×曲げ)

メーカー希望
小売価格 **¥6,600** (税込)

本体価格 **¥6,000**

品 番

SBR-100-50

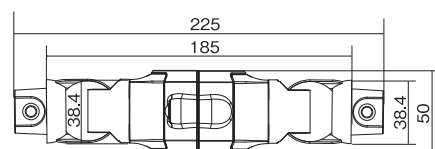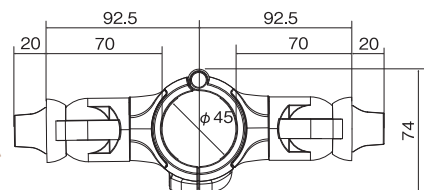

システム跳ね上げ 回転部エンド付 / システム跳ね上げ 先端部エンド付


システム跳ね上げ 回転部エンド付

メーカー希望
小売価格 **¥19,250** (税込)

本体価格 **¥17,500**

品 番

SBR-100-71

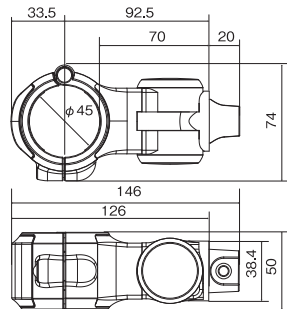


システム跳ね上げ 先端部エンド付

メーカー希望
小売価格 **¥6,050** (税込)

本体価格 **¥5,500**

品 番

SBR-100-72

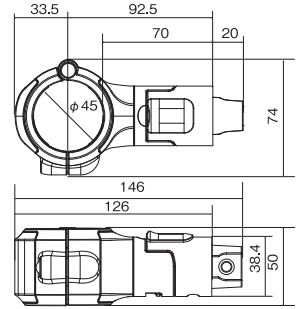

システムブラケット 取り外しセット



メーカー希望
小売価格 **¥11,000** (税込)

本体価格 **¥10,000**

品 番

SBR-100-80

システム跳ね上げ 先端部エンド付と共通

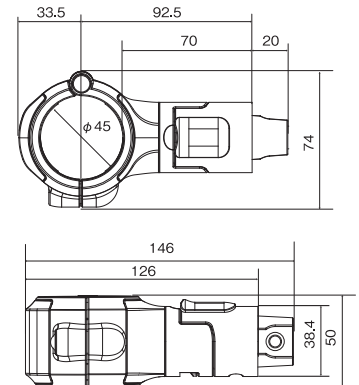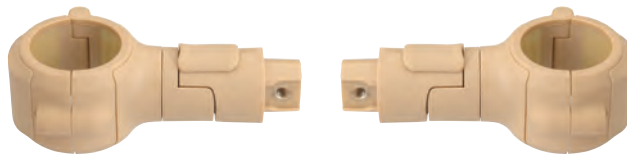


システム接続ブラケット T型 オフセット

メーカー希望
小売価格 **¥6,600** (税込)

本体価格 **¥6,000**


品 番

SBR-100-60

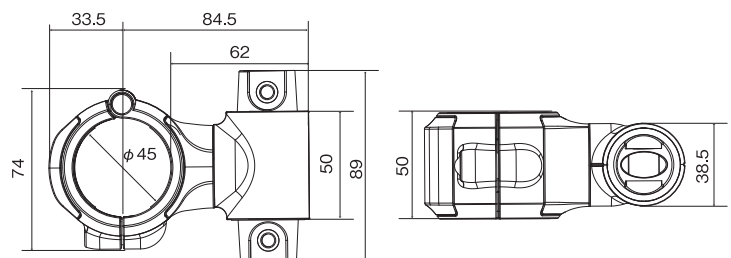

ご利用者に適した組合せができます

ベスポジ-eのブラケットは各ブラケットの機構を自由に組み合わせるためにシステム化され、六角レンチ1本で組み換えが可能です。新たにベスポジ-eを追加する際など、ブラケットを追加しなくても、既についているブラケットに接続の機構部分を六角レンチでボルトオンするだけで必要な横手すり・オプションをつなげていけるシステムです。

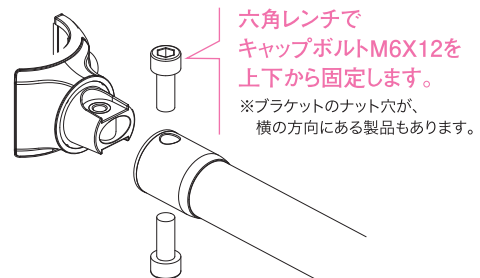

製品一覧表 ベスポジ-eのメンテナンス用補修部品

■ 丸型天井ベース



メーカー希望 小売価格	¥11,000 (税込)
本体価格	¥10,000
品番	BPE-400-10

■ T型天井ベース



メーカー希望 小売価格	¥14,300 (税込)
本体価格	¥13,000
品番	BPE-400-20

■ 下部補助ベース



メーカー希望 小売価格	¥5,500 (税込)
本体価格	¥5,000
品番	BPE-400-30

■ 耐水ベース



※耐水ベース用
滑り止め付き
※セット販売のみ

メーカー希望 小売価格	¥8,800 (税込)
本体価格	¥8,000
品番	BPE-100-90

※浴室での使用はできません。

■ 丸型天井ベース・下部補助ベース共通滑り止め




4枚セット×2	
メーカー希望 小売価格	¥3,520 (税込)
本体価格	¥3,200
品番	BPE-400-35

■ 耐水ベース滑り止め




4枚セット×2	
メーカー希望 小売価格	¥5,500 (税込)
本体価格	¥5,000
品番	BPE-400-85

■ T型天井ベース用滑り止め

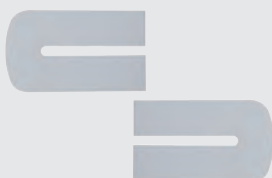

2枚セット×2	
メーカー希望 小売価格	¥5,500 (税込)
本体価格	¥5,000
品番	BPE-400-25

■ シリコン滑り止め

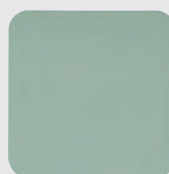

※160mm角 (5枚セット)	
メーカー希望 小売価格	¥11,000 (税込)
本体価格	¥10,000
品番	ENT-300-25

■ システムブラケット滑り止め



10枚入

メーカー希望 小売価格	¥2,750 (税込)
本体価格	¥2,500
品番	SBR-300-40

■ ブラケット用ボルトM6×20



10個入

メーカー希望 小売価格	¥2,750 (税込)
本体価格	¥2,500
品番	NBR-100-11

■ シングルブラケット滑り止め(小)



10枚入

メーカー希望 小売価格	¥3,300 (税込)
本体価格	¥3,000
品番	SBR-400-30

■ 下部ベース



※下部ベース固定用ナット類付き	
メーカー希望 小売価格	¥4,180 (税込)
本体価格	¥3,800
品番	BPE-400-80

■ 下部ベースキャップ



5個入	
※インナーケース用ボルト2本付き	
メーカー希望 小売価格	¥1,925 (税込)
本体価格	¥1,750
品番	BPE-400-81

■ ハンドルカバー



※5個入り

メーカー希望
小売価格 **¥5,500 (税込)**

本体価格 **¥5,000**

品番	BPE-400-40
----	------------

■ ロックキャップ



※5セット

メーカー希望
小売価格 **¥1,925 (税込)**

本体価格 **¥1,750**

品番	BPE-400-41
----	------------

※バネユニット固定用ボルト2本付き

■ 日常点検シール



※10枚入り

メーカー希望
小売価格 **¥3,300 (税込)**

本体価格 **¥3,000**

品番	BPE-400-50
----	------------

■ 赤ラインシール



※1シート(10枚)

メーカー希望
小売価格 **¥2,200 (税込)**

本体価格 **¥2,000**

品番	BPE-400-60
----	------------

■ 警告窓シール



※1シート(10枚)

メーカー希望
小売価格 **¥2,200 (税込)**

本体価格 **¥2,000**

品番	BPE-400-70
----	------------

■ ペスポジ-e クッション



メーカー希望
小売価格 **¥3,850 (税込)**

本体価格 **¥3,500**

品番	BPE-300-25
----	------------

■ 天井ベースキャップ



5個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,650 (税込)**

本体価格 **¥1,500**

品番	BPE-400-11
----	------------

■ キャップボルトM6×20

20個入



※膝当て、肘置き、ブッシュ
手すりのクッションの固
定に使用。

メーカー希望
小売価格 **¥660 (税込)**

本体価格 **¥600**

品番	SBR-200-40
----	------------

■ キャップボルトM6×12

20個入



※システム木手すりジョイント固
定に使用
※システム木手すり固定
システムブラケット固定に使用

メーカー希望
小売価格 **¥550 (税込)**

本体価格 **¥500**

品番	SBR-200-10
----	------------

■ ジョイントリング



10個入

メーカー希望
小売価格 **¥3,300 (税込)**

本体価格 **¥3,000**

品番	SBR-200-30
----	------------

■ エンドキャップ



10個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,650 (税込)**

本体価格 **¥1,500**

品番	SBR-300-30
----	------------

■ 手すりホルダー



2個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,100 (税込)**

本体価格 **¥1,000**

品番	SBR-100-75
----	------------

■ 専用垂直器



2個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,100 (税込)**

本体価格 **¥1,000**

品番	12021
----	-------

■ 蓄光リング



4個入

メーカー希望
小売価格 **¥1,100 (税込)**

本体価格 **¥1,000**

品番	BPE-400-90
----	------------

介護保険特定
福祉用具購入対象

マスカット ポールタイプⅡ (浴槽用手すり)

立ち座り

転回・移乗



安全

ユニットバスに取り付け可能な縦型手すり「マスカット」ポールタイプ。

天井への負荷が小さく、浴槽のエプロンを触ることなく取り付けが可能です。

安心

直径 35mm の握りやすいポールと、手の位置を安定して固定するグリップボールの採用で、またぎ動作や立ち座り動作をサポートします。

快適

腰に負担をかけず、前傾しない姿勢で方向転換やまたぎ動作を、無理なく安定した姿勢で足上げ動作や屈伸動作を行えるなど、安全な浴室での動作をサポートします。

新レバー方式



より簡単に

新カバー式





より使いやすく

横ずれ防止機構



よりズレにくい

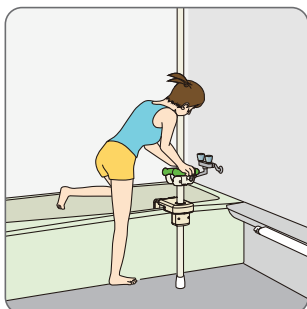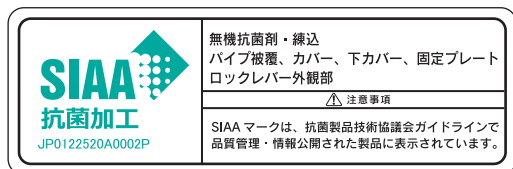

側方またぎ




正面またぎ



立ち座り動作補助

設置可能な浴槽

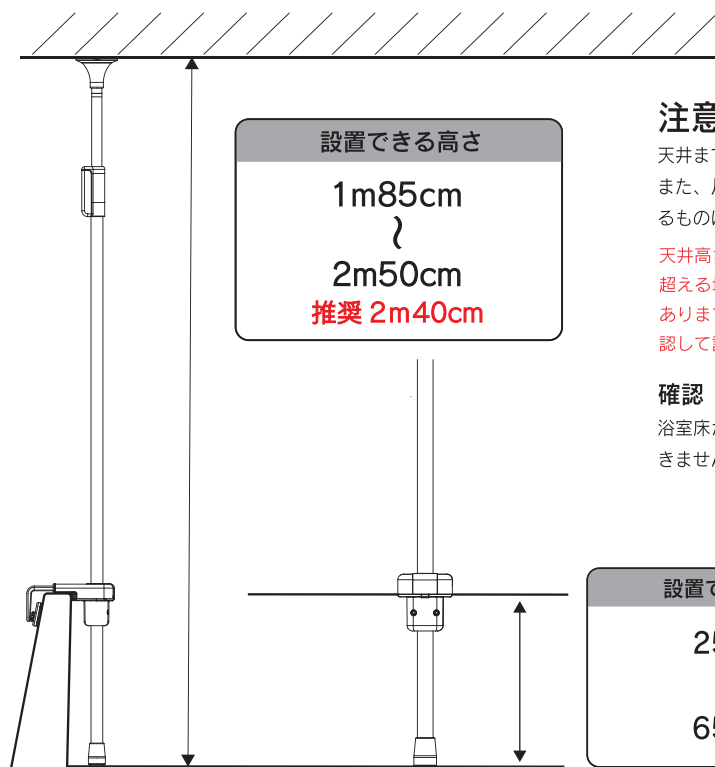

注意


天井までの高さを確認してください。

また、片流れの天井やドーム天井、点検口や天井が浮き上がるものは設置できません。

天井高さは2m50cmまで対応しますが、推奨の2m40cmを超える場合、天井の強度によって設置が不安定になる場合があります。天井の強度を確認し、本体のスレなどがないか確認して設置してください。




確認

浴室床から浴槽縁までの距離が25cm未満の浴槽には設置できません。

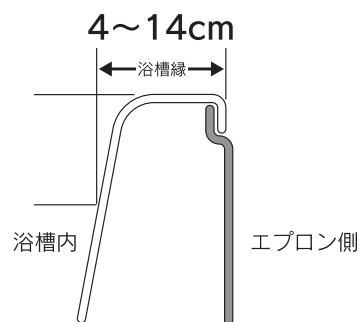

浴槽縁の厚みが4~14cmの範囲内




リムの高さが2cm以上

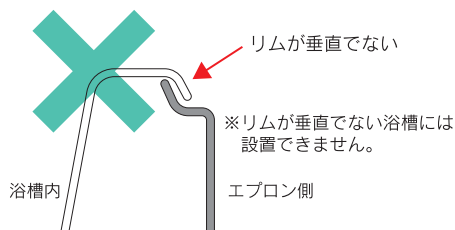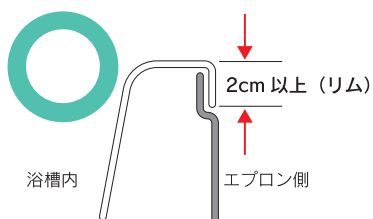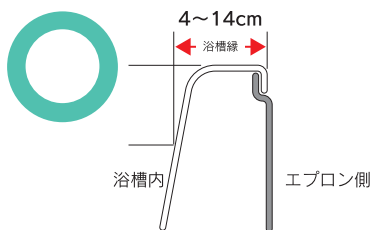

エプロンの出幅がリムより4.5cm以内

浴槽縁の高さが25cm~65cm以内

コーナーへの対応はプレートが動く±10°以内

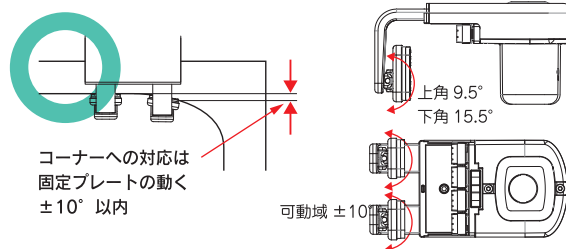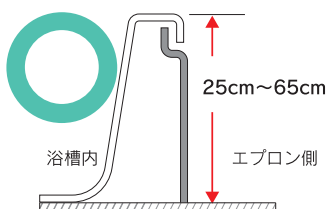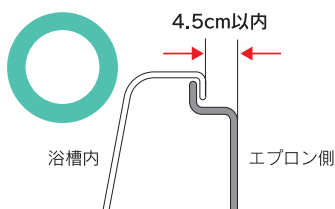

注意

設置条件の範囲内の場合でも、長期間の使用や浴槽の劣化等によって設置に不具合が出る可能性があります。もし、使用中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、指定事業者にご連絡してください。

マスカット ポールタイプII (浴槽用手すり)



基本セット

メーカー希望
小売価格 **¥42,900** (税込)

本体価格 **¥39,000**

品 番	TAISコード
MP2000	00254-000387



滑り止めセット

メーカー希望
小売価格 **¥43,450** (税込)

本体価格 **¥39,500**

品 番	TAISコード
MP2000-100	00254-000388



グリップ白2個付き

メーカー希望
小売価格 **¥44,000** (税込)

本体価格 **¥40,000**

品 番	TAISコード
MP2000-200	00254-000389



グリップ緑2個付き

メーカー希望
小売価格 **¥44,000** (税込)

本体価格 **¥40,000**

品 番	TAISコード
MP2000-210	00254-000390



滑り止め・グリップ白2個付き

メーカー希望
小売価格 **¥44,550** (税込)

本体価格 **¥40,500**

品 番	TAISコード
MP2000-300	00254-000391



滑り止め・グリップ緑2個付き

メーカー希望
小売価格 **¥44,550** (税込)

本体価格 **¥40,500**

品 番	TAISコード
MP2000-310	00254-000392



リングアーム(グリーン)付き

メーカー希望
小売価格 **¥56,100** (税込)

本体価格 **¥51,000**

品 番	TAISコード
MP2000-800	00254-000393



リングアーム(ベージュ)付き

メーカー希望
小売価格 **¥56,100** (税込)

本体価格 **¥51,000**

品 番	TAISコード
MP2000-810	00254-000394



グリップ・リングアーム(緑)付き

メーカー希望
小売価格 **¥57,200** (税込)

本体価格 **¥52,000**

品 番	TAISコード
MP2000-900	00254-000405

■ マスカット用オプション



滑り止め (10枚)

メーカー希望
小売価格 **¥5,500** (税込)

本体価格 **¥5,000**

品 番	MP80-10
-----	---------



リングアーム(グリーン)

メーカー希望
小売価格 **¥14,300** (税込)

本体価格 **¥13,000**

品 番	MPRA-100
-----	----------



グリップ(緑) (10個)

メーカー希望
小売価格 **¥5,500** (税込)

本体価格 **¥5,000**

品 番	BR-66G
-----	--------



グリップ(白) (10個)

メーカー希望
小売価格 **¥5,500** (税込)

本体価格 **¥5,000**

品 番	BR-66W
-----	--------



リングアーム(ベージュ)

メーカー希望
小売価格 **¥14,300** (税込)

本体価格 **¥13,000**

品 番	MPRA-110
-----	----------



使用例

ベストセレクトバー（ユニット鋼板壁面用）

ユニット鋼板壁面手すり

マグネット式固定工法 PAT.

磁力

マグネットベース裏面
(特殊接着シート付き)

鋼板パネル専用




施工責任取付製品

プリント鋼板パネル
塩ビ鋼板パネル
ホーローパネル

安全耐荷重




脱離強度 **100kgf**

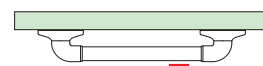


引張強度 **100kgf**

磁石がつく鋼板パネルに取り付け OK


マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。

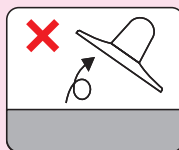


磁石がつかない壁面

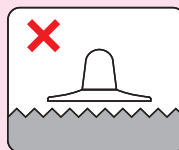






凹凸の大きな壁面

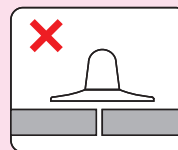

穴の開いている壁面

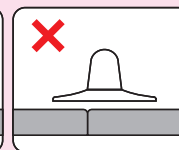

継目や段差のある壁面

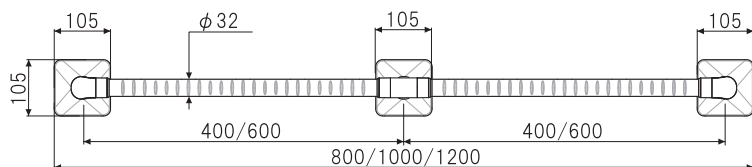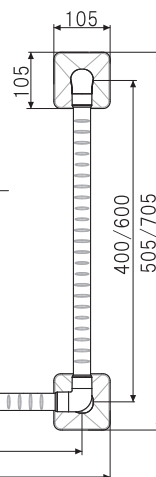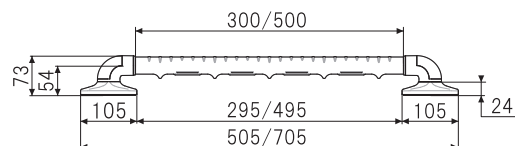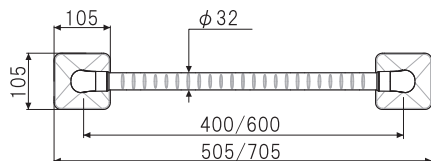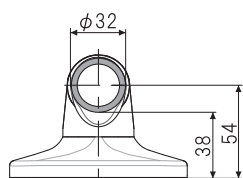

施工には混合ガンが必要です。



SB-310	混合ガン	
価格	¥ 8,800 (税込)	¥ 8,000 (税抜)

マグネット手すり	品番	サイズ	本体価格	
ストレート	UM-400-10	400	¥ 20,900 (税込)	¥ 19,000 (税抜)
	UM-600-10	600	¥ 22,000 (税込)	¥ 20,000 (税抜)
L 型	UM-440-10	400×400	¥ 34,100 (税込)	¥ 31,000 (税抜)
	UM-460-10	600×400	¥ 35,200 (税込)	¥ 32,000 (税抜)
	UM-660-10	600×600	¥ 36,300 (税込)	¥ 33,000 (税抜)
連続型	UM-404-10	400+400	¥ 34,100 (税込)	¥ 31,000 (税抜)
	UM-406-10	600+400	¥ 35,200 (税込)	¥ 32,000 (税抜)
	UM-606-10	600+600	¥ 36,300 (税込)	¥ 33,000 (税抜)

ベストセレクトバー（タイル・樹脂壁面用）

タイル・樹脂壁面手すり

圧着式固定工法 PAT.



圧着

圧着ベース裏面

タイル壁面・パネル用




施工責任取付製品

タイル壁面
タイルパネル
樹脂パネル

安全耐荷重



脱離強度 **100kgf**

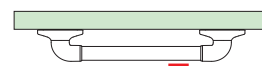


引張強度 **100kgf**

36 タイル(109 角108 角)へも現場対応可能

ベース部圧着機構により、特殊接着シートを確実に接着、
タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。

100 角、150 角、200 角タイルの他、旧来の 36 タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターを現場で調整することで、ピッチを合わせることができます。600 用 (556mm 対応) 400 用 (444mm 対応)

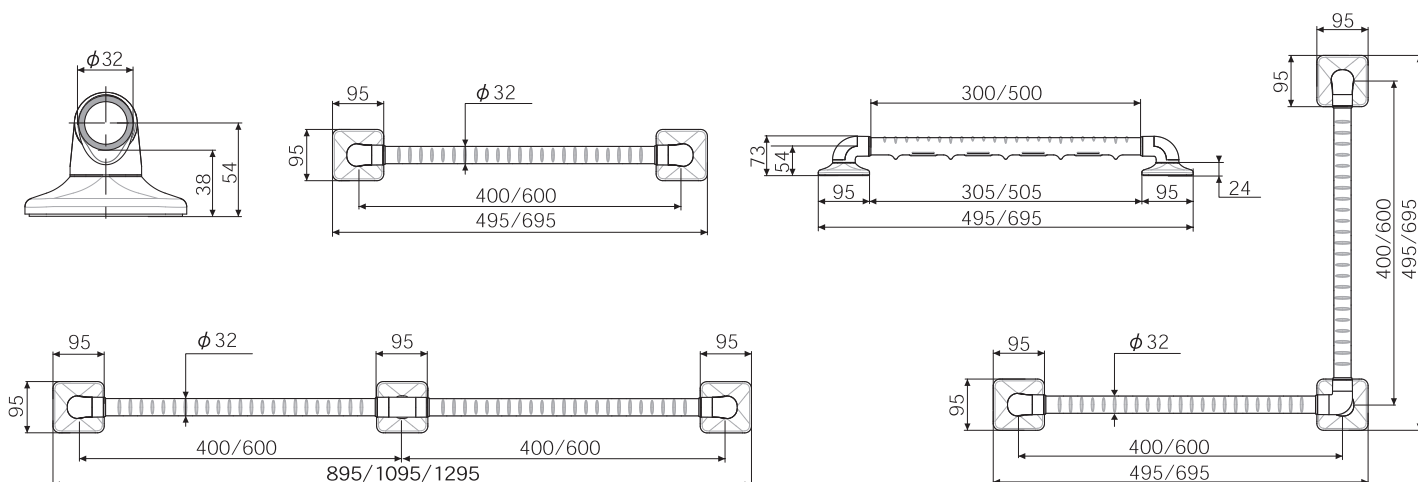

施工には混合ガンが必要です。



SB-310	混合ガン	
価 格	¥ 8,800 (税込)	¥ 8,000 (税抜)

圧着手すり	品 番	サイズ	本体価格	
ストレート	UA-400-10	400	¥ 20,900 (税込)	¥ 19,000 (税抜)
	UA-600-10	600	¥ 22,000 (税込)	¥ 20,000 (税抜)
L 型	UA-440-10	400×400	¥ 34,100 (税込)	¥ 31,000 (税抜)
	UA-460-10	600×400	¥ 35,200 (税込)	¥ 32,000 (税抜)
	UA-660-10	600×600	¥ 36,300 (税込)	¥ 33,000 (税抜)
連続型	UA-404-10	400+400	¥ 34,100 (税込)	¥ 31,000 (税抜)
	UA-406-10	600+400	¥ 35,200 (税込)	¥ 32,000 (税抜)
	UA-606-10	600+600	¥ 36,300 (税込)	¥ 33,000 (税抜)

伸縮手すり強度試験データ

強度試験

伸縮手すり 785N(80kgf)・1176N(120kgf) 荷重試験

伸縮手すり1200サイズを用いて、H型に組み、ブラケット直と曲げの強度を計測する。
強度試験の方法は芯々1200mmの中央部を鉛直方向に荷重するものである。

■ 試験内容

試験機をまたぐ形で、H型固定伸縮1200とH型曲げ伸縮1200を取り付け、中心を荷重する。785N(80kgf)・1176N(120kgf)まで荷重し15秒ホールドする。


- 試験荷重値 : 80kgf・120kgf(荷重後15秒ホールド)
- 試験速度 : 手動
- 試験機 : オートグラフ AGS-50NX(島津製作所製)
- たわみ誤差 : 試験後手動にて荷重を下げ、負荷が0になり、復元時間として約5分どどめる。

■ 試験結果

伸縮手すりの破損・変形無し。機構部分の不具合も無し。曲げブラケットのたわみ量が大きいのは、ブラケットの長さ100mmが加わり、ブラケットの構造上のたわみが加算されるため。

試料	最大荷重	最大たわみ量	復元たわみ誤差
曲げ	785N(80kgf)	23.8mm	3.6mm
	1176N(120kgf)	36.6mm	
固定	785N(80kgf)	16.7mm	2.5mm
	1176N(120kgf)	25.15mm	

■ 試験イメージ

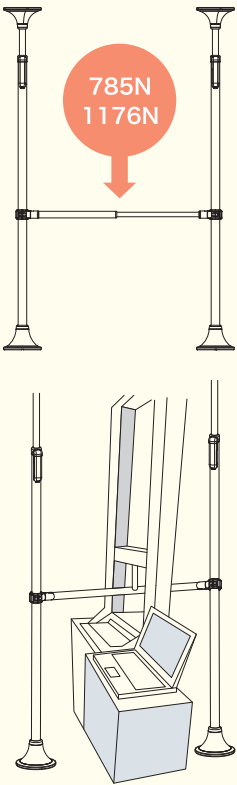


伸縮手すり 繰り返し荷重試験(疲労試験)

ベースポジ-eと伸縮手すりをH型に組み、900～1200サイズの伸縮手すりを最長である1200mmに設定し、試験機をまたぐ形で設置する。芯々1200mmの中央を試験機にて400N(40kgf)での繰り返し荷重を行う。(400Nは80kgの人が利用した際の想定荷重値)
これを7年使用する想定25,550回を上回る、30,000回を目標に行う。検証は1,000回ごとに伸縮の動作確認を実施し、破損・変形がないことを確認する。10,000回ごとに、ブラケットを分解し、ブラケット樹脂に疲労劣化の兆候、破損・変形がないか確認する。

■ 試験結果

荷重回数	破損・変形	ブラケット内部状態確認
10,000回	無し	破損・変形・劣化の兆候無し
20,000回	無し	破損・変形・劣化の兆候無し
30,000回	無し	破損・変形・劣化の兆候無し

■ 試験イメージ

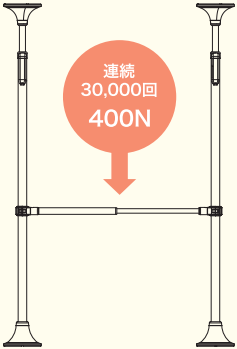

マスカット・ベストセレクトバー強度試験データ

強度試験


マスカットポールタイプ 980.665N (≒100kgf) 荷重試験

マスカットポールタイプを用いてユニットバスに設置し、浴槽床から1000mmの位置から700mmの位置に下方向へ引っ張り、変形、破損の状態を計測する。


■ 試験内容

JIS規格の静的水平荷重の試験に基づきながら、JISの400Nの目標値より高い980Nを弊社の目標値として、同様の静的水平荷重試験を行い、手すりの脱離や破損がないことを確認する。
(負荷は静的荷重を目標とすることから100mm/minの速度で荷重していく)

■ 試験結果

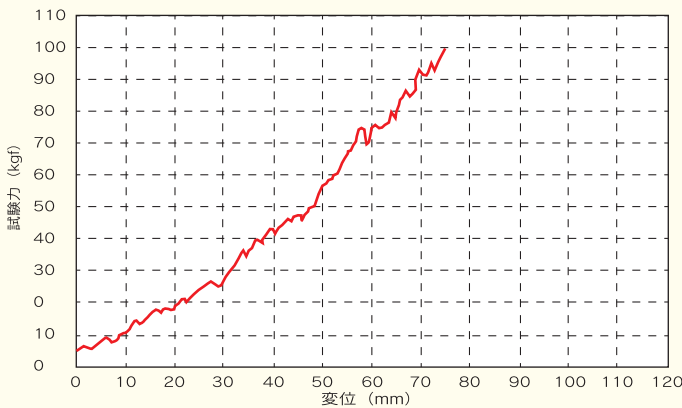

■ 試験イメージ

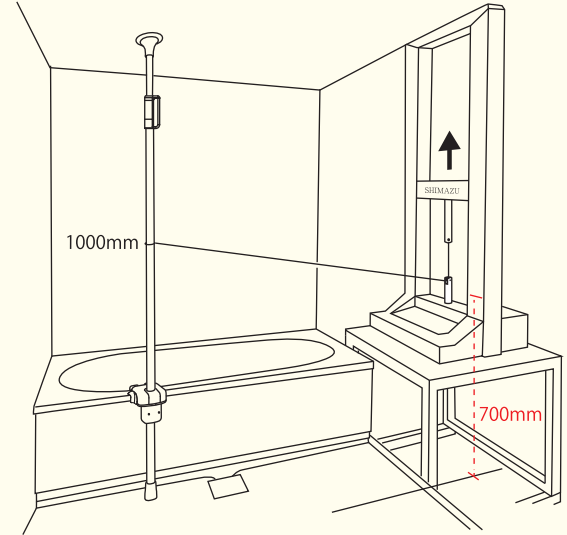


強度試験動画 QRcode

セレクトバー荷重強度試験（社内及び、公的機関で実施）

荷重試験


■ せん断試験


荷重後に試験体にどれだけの荷重が加わり、どのように変化したのかを検証する試験

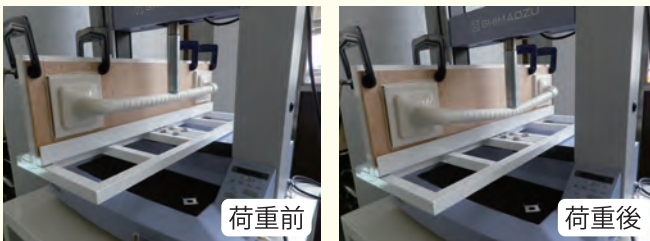

条件・・・被着壁面に固定した手すり中央部を一定速度で加圧
手すりが破損、脱離するまでの荷重をもとめる
結果・・・安全荷重内での変化はなく、一定して強度を確保

せん断試験グラフ
試験機 : オートグラフ
試験速度 : 10 mm / min

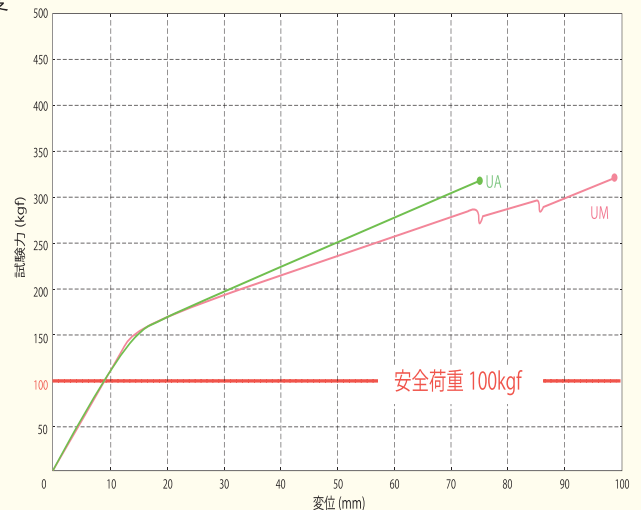

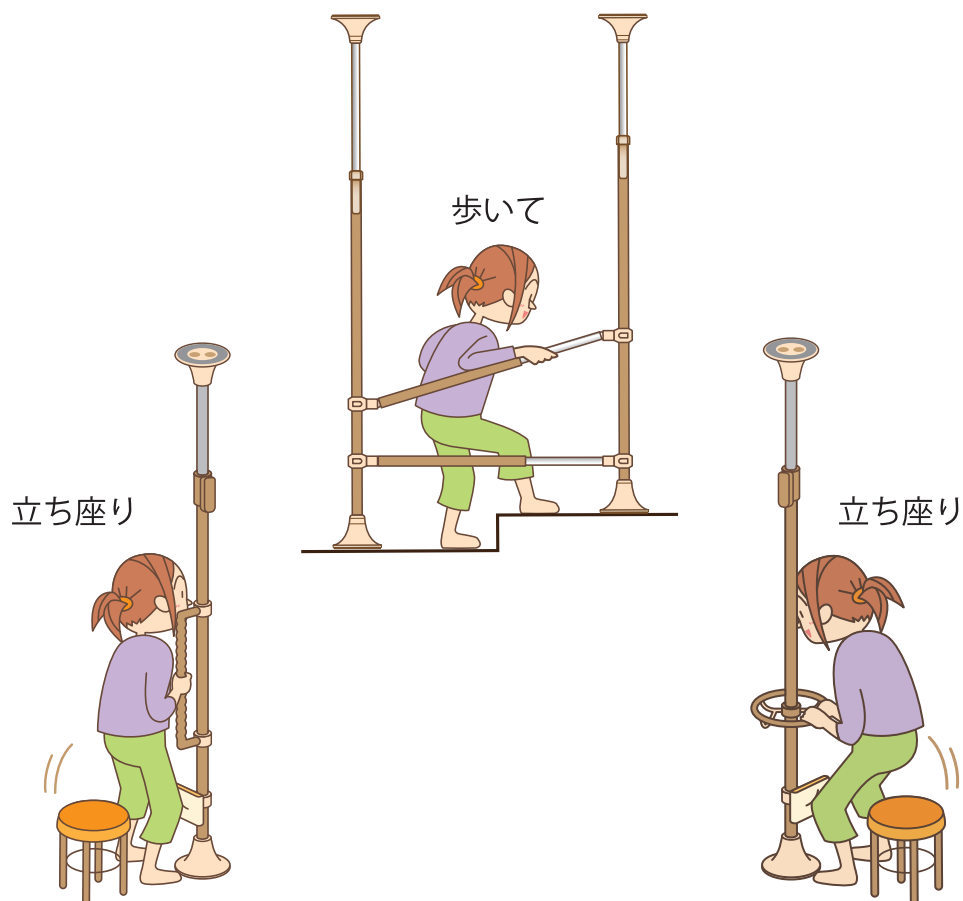

製品・施工関係問い合わせ

DIPPER ホクメイ株式会社 ホームページ <http://www.dipper-hokumei.co.jp/>

本 社	〒110-0015	東京都台東区東上野 1-7-5	TEL 03-5818-0621 (代)	FAX 03-5818-0624
大 阪 本 部	〒544-0001	大阪府大阪市生野区新今里 2-4-1	TEL 06-6754-0625 (代)	FAX 06-6758-6485
中 部 営 業 所	〒453-0013	愛知県名古屋市中村区亀島 2-26-4	TEL 052-459-3004 (代)	FAX 052-453-1277
福 岡 営 業 所	〒812-0013	福岡県福岡市博多区博多駅東 2-18-30	TEL 092-686-9300 (代)	FAX 092-686-9260

■カタログの商品の仕様・価格は改良の為、予告なく変更する場合があります。■カタログの写真は印刷の為、多少実物とは色が異なります。